




Modelo	Capacidad	Potencia	Tanque	Número Unidades	Cabina Acústica	dB(A)
1-48NL	2.5 CFM	1.0 HP	48 Lts.	1	NO	74
1-48NLS	2.5 CFM	1.0 HP	48 Lts.	1	SI	63
1.5-48NL	4.6 CFM	1.5 HP	48 Lts.	1 - 2	NO	76
1.5-48NLS	4.6 CFM	1.5 HP	48 Lts.	1 - 2	SI	65
2-110NL	6.7 CFM	2.0 HP	110 Lts.	2	NO	76
2-48NLS	6.7 CFM	2.0 HP	48 Lts.	2	SI	65
3-150NL	10.4 CFM	3.0 HP	150 Lts.	3	NO	78
5-300NLS	18.0 CFM	5.0 HP	300 Lts.	6	SI	60



Línea Dental

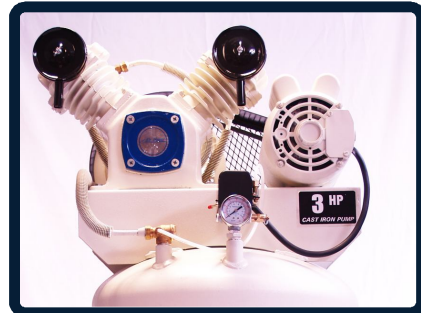

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un aire libre de partículas de aceite debe ser usado para la operación del instrumental y el trabajo con pacientes en consultorios dentales.

El aire comprimido libre de contaminantes reducirá el mantenimiento a las piezas de mano y protegerá al paciente del contacto con aceite.

Para la eliminación de estas partículas, la solución es la instalación de compresores no lubricados recíprocos de la línea Dental de FIAC.

Los compresores de la línea dental garantizan la limpieza del aire comprimido de aceite debido a su sistema de compresión de anillos de teflón que elimina la necesidad de lubricar internamente el compresor.

Adicionalmente el equipo puede ser instalado dentro de cualquier gabinete para su operación cerca del médico, debido a su sistema de reducción de nivel sonoro (opcional).

VENTAJAS

- Cabina acústica para bajo nivel sonoro (opcional)
- Fácil acceso y mantenimiento.
- Aire completamente limpio
- Equipos con mayor vida útil.
- Menor temperatura de trabajo debido al tipo de aspas y a la ventilación forzada
- Cilindros tratados para evitar oxidación.
- Sello de biela de mayor capacidad.

